


Fresas y Kits de Topes de Fresa

Deje atrás
las limitaciones

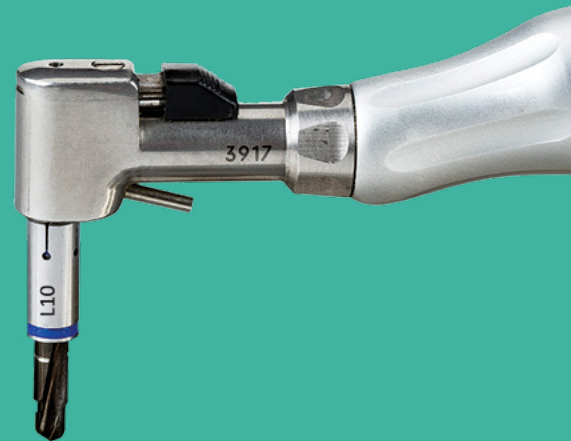

LEAVE
LIMITS
BEHIND

Fresas Quirúrgicas de 2 y 3 Etapas

Fresas quirúrgicas DLC de 2 y 3 etapas, diseñadas para cirujanos exigentes.

Al realizar cirugía de implantes es necesario contar con fresas que simplifiquen el procedimiento, ahorrando tiempo, mejorando la precisión y minimizando los riesgos. Con las fresas quirúrgicas DLC de 2 y 3 etapas, esto es exactamente lo que se consigue.

- ▶ Diseño único en etapas, para minimizar la osteotomía y aumentar la estabilidad en la zona apical
- ▶ Función avellanadora integrada, para simplificar el fresado en huesos densos
- ▶ Revestimiento DLC de baja fricción y larga duración, para máximo respeto a los tejidos y eficiencia en los costes

Diseño Avanzado en Fresas Tri-Step de 3 Etapas: Toda una nueva experiencia

Las fresas Tri-Step de 3 etapas del Adin Implant System están diseñadas para acortar los protocolos de fresado, minimizar la osteotomía y reducir el remplazo de fresas. Una fresa lo hace todo, en lugar de tres fresas y tres procedimientos separados.



Deje atrás las limitaciones y únase a la revolución del fresado con DLC

El revestimiento DLC de las fresas ADIN, proporciona dureza y baja fricción para incrementar la vida útil de las fresas, mantener la capacidad de corte por más tiempo y generar menos calor, minimizando así el sobrecalentamiento del hueso.

- ▶ Aumento de la precisión
- ▶ Color y marcas de alto contraste para una mejor visibilidad
- ▶ Menos pasos de fresado debido a sus diseños de 2 y de 3 etapas
- ▶ Función avellanadora integrada
- ▶ Aumento de la estabilidad en el ápice de los implantes
- ▶ Mínima fricción para una mejor cicatrización
- ▶ Resistentes a la corrosión
- ▶ Mayor duración del filo de corte

Para ver todas las medidas disponibles consulte la última página.

Nota: debido a la longitud de la punta de las fresas, debe tenerse en cuenta que la preparación real supera hasta en 1 mm la longitud de las marcas.

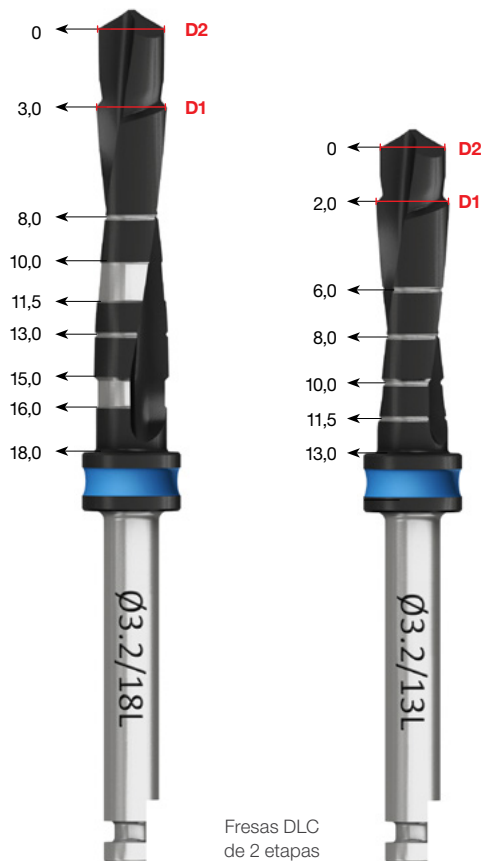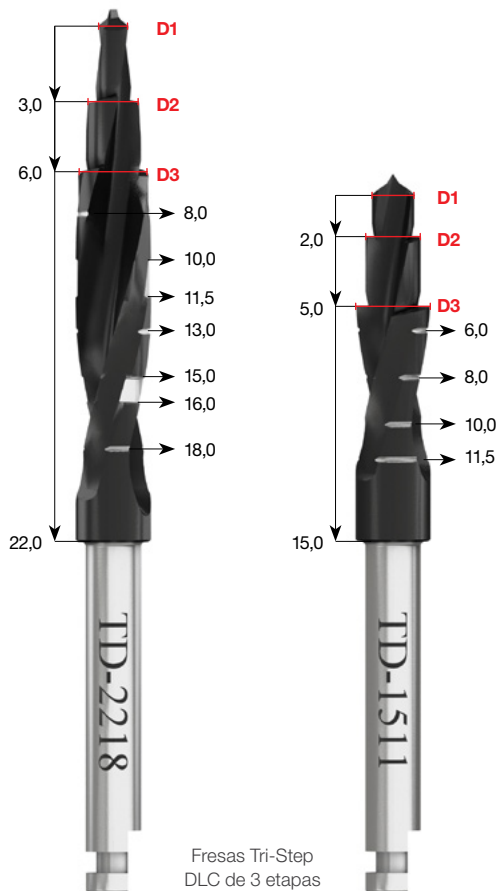

Kits de Topes de Fresas

Los kits de topes de fresa de Adin, marcarán un antes y un después en el control y seguridad del fresado.

A las ventajas de las fresas de 2 etapas DLC de Adin, se suma la precisión, comodidad y seguridad de los kit de topes de fresa.

El conjunto “fresa y tope” de Adin ha sido diseñado para hacer una osteotomía segura del alvéolo. Los topes vienen en varias longitudes y son fáciles de montar, por su parte las fresas DLC garantizan el control. Dígame adiós al fresado convencional con marcas, con los nuevos kits de topes de fresas de Adin podrá trabajar siempre a la profundidad exacta, sin fatiga visual ni riesgos innecesarios.

Detalles del producto:

- Los topes son suministrados en contenedores metálicos esterilizables.
- El contenedor metálico está diseñado para albergar ordenadamente todas las piezas del kit, con espacios individuales y específicos para cada tope.
- Cada tope de fresa posee marcas de color que identifican el diámetro de la fresa y marcas láser que indican la longitud del fresado.



Catálogo de referencias de Fresas DLC

Three Step DLC Drills



TD1511 Fresa Tri-Step DLC de tres etapas, corta



TD2218 Fresa Tri-Step DLC de tres etapas, larga

Long DLC Two Step Drills



DL1820 Fresa piloto 2mmD x 8-18mmL

Blanco



DL1825 Fresa espiral de 2,5mmD x 8-18mmL (Touareg UNP)

Mostaza



DL1828 Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 8-18mmL

Rojo



DL1832 Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 8-18mmL

Azul



DL1836 Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 8-18mmL

Verde



DL1842 Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 8-18mmL

Negro



DL1846 Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 8-18mmL

Amarillo



DL1852 Fresa espiral de 2 pasos 4,8/5,2mmD x 8-18mmL

Marrón



DL1856 Fresa espiral de 2 pasos 5,2/5,6mmD x 8-18mmL

Gris

Fresas DLC de Dos Pasos - Cortas (13 mm)



DL1320 Fresa piloto 2mmD x 6-13mmL

Blanco



DL1325 Fresa espiral de 2,5mmD x 3-13mmL (Touareg UNP)

Mostaza



DL1328 Fresa espiral de 2 pasos 2,3/2,8mmD x 6-13mmL

Rojo



DL1332 Fresa espiral de 2 pasos 2,8/3,2mmD x 6-13mmL

Azul



DL1336 Fresa espiral de 2 pasos 3,2/3,6mmD x 6-13mmL

Verde



DL1342 Fresa espiral de 2 pasos 3,8/4,2mmD x 6-13mmL

Negro



DL1346 Fresa espiral de 2 pasos 4,2/4,6mmD x 6-13mmL

Amarillo



DL1352 Fresa espiral de 2 pasos 4,8/5,2mmD x 6-13mmL

Marrón



DL1356 Fresa espiral de 2 pasos 5,2/5,6mmD x 6-13mmL

Gris

Catálogo de referencias de los Kits

S1001 ▶ Kit de Topes de fresas largas - Primera serie - L 18 mm: Ø 2 mm; 2,8 mm; 3,2 mm; 3,6 mm

S1002 ▶ Kit de Topes de fresas largas - Serie ancha - L 18 mm: Ø 4,2 mm; 4,6 mm; 5,2 mm; 5,6 mm

S1003 ▶ Kit de Topes de fresas cortas - Primera serie - L 13 mm: Ø 2 mm; 2,8 mm; 3,2 mm; 3,6 mm

S1004 ▶ Kit de Topes de fresas cortas - Serie ancha - L 13mm: Ø 4,2 mm; 4,6 mm; 5,2 mm; 5,6 mm

Los productos de ADIN cumplen y superan los más altos estándares establecidos por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) y otras agencias reguladoras. Todos los productos de ADIN poseen marcado CE de conformidad con la Directiva del Consejo 93/42/CEE y con la enmienda 2007/47/EC. ADIN cumple con la norma ISO 13485:2003 y con el Sistema Canadiense para la Evaluación de Conformidad de Productos Sanitarios (CMDCAS). Por favor, póngase en contacto con la oficina local de ventas de ADIN para recibir más información de nuestro productos y de la disponibilidad en su territorio.